



**INTEGRA
TOOLS**

Formerly
LIFEtool Solutions

CE UKCA FC

VERSION
// 1.1

IntegraMouse® AIR Kısa Kılavuz

integramouse.com



Türkçe (TR)



**Kurulum,
Temizlik ve Kullanım**

IntegraMouse AIR'in Montajı

1.



Ağızlığı takın, pim ve yuvaya dikkat edin.

2.



Hafifçe bastırarak ağızlığı yerine oturana kadar saat yönünün tersine çevirin.

3.



IMAIR'i montaj sisteminize sabitleyin (1/4" dış).

4.



IMAIR'i istediğiniz konuma getirin.

İlk kurulum için kablolu bağlantıyla çalıştırmanızı öneririz.

5.



Kabloyu IMAIR'in arka ucundaki USB-C soketine takın.

6.




USB kablосunu bilgisayara takın (USB-A soketi).

7.



IMAIR'i açmak için sağ dudak düğmesine kısaca basın.

8.

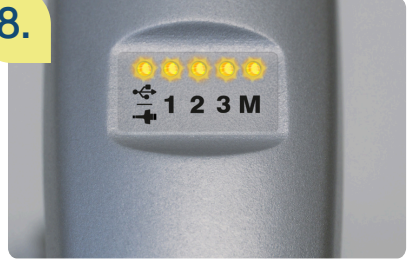

Tüm LED'ler kısa süreliğine yanar, IMAIR kendini otomatik olarak kalibre eder.

9.



Sol LED yanar (kablolu bağlantı). Sağ LED (M) söner (fare modu).



Kalibrasyon sırasında lütfen ağızlığa dokunmayın!

Aşağıdaki adımlar otomatik olarak gerçekleşir:

- Dahili akü şarj olur.
- Bilgisayarınız IntegraMouse AIR'i standart fare olarak yükler.

Kablosuz Kurulumu Kısa Kılavuz

(Bluetooth üzerinden eşleştirme)



IntegraMouse AIR'i Bluetooth ile kullanmak için akünün yeterince şarjlı olduğundan emin olun. Bunun için birlikte verilen şarj cihazını kullanın ve aküyü ilk kullanımdan önce şarj edin.

1.



Sağ dudak düğmesine kısaca basın (IMAIR'i açın).

2.




Tüm LED'ler kısa üreliğine yanar, IMAIR kalibre olur.

3.



Sol LED yanar.

4.

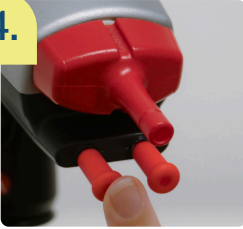

Sol dudak düğmesine 3 saniye basın.

5.



LED 1 turuncu renkte yanıp sönmeye başlar.

6.




Sol dudak düğmesine basarak istediğiniz konumu seçin (1, 2 veya 3).

7.



Seçilen LED mavi yanıp sönene kadar kısa süre bekleyin.

8.

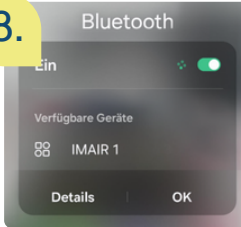

Cihazınızda aygıt aramasını başlatın ve IMAIR'i seçin.

9.



Eşleştirme başarılı olduğunda yanıp sönmeye durur ve LED turuncu renkte sabit yanar.

Temizlikle İlgili Genel Bilgiler



IntegraMouse AIR'in Klinik Ortamda Kullanımı

- Klinik ortamlarda ağızlık (membran ve silikon başlık dahil) ile dudak düğmeleri tek kullanımlık ürün olarak kullanılmalıdır.
- Ağızlığın (membran ve silikon başlık dahil) ve dudak düğmelerinin değiştirilme aralıklarını uzman personel veya hekim belirler.
- Bulaşıcı hastalık şüphesi olması durumunda lütfen ek güvenlik önlemleri alın (örn. ağızlığı değiştirirken eldiven kullanın).

Silerek Dezenfeksiyon

- Yalnızca LEXAN polikarbonat için uygun yüzey dezenfektanları kullanın.
- Schülke & Mayr'dan (www.schuelke.com) şu ürünleri öneririz: Mikrozyd Sensitive Liquid; Mikrozyd Sensitive Wipes veya eşdeğer ürünler



Islak veya Gama Sterilizasyonu Uygulamayın

Ağızlık, dudak düğmeleri ve IntegraMouse AIR'in diğer bileşenleri ıslak sterilizasyonu veya gama sterilizasyonu ile temizlenemez.

Aşındırıcı Temizlik Maddeleri Kullanmayın

Kesinlikle aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın; bu, bileşenlerin yüzeyine zarar verir.

Suya Batırmayın

IntegraMouse AIR'i ve elektronik bileşenlerini kesinlikle suya batırmayın ve temizlik için akan su kullanmayın – bu, elektronik aksamaya kalıcı hasar verir.



Bileşenlerin Doğru Temizlenmesi

- IntegraMouse AIR, kablосуyla birlikte güç adaptörü ve montaj sistemi bileşenlerini hafif nemli, tüy bırakmayan bir bezle silin
-
- Bileşenleri en az iki haftada bir temizleyin.

Ağızlığı Temizleme ve Membrani Değiştirme Kısa Kılavuzu



Ağızlık ve Dudak Düğmeleri için Temizlik ve İmha Aralığı

Temizleme: IntegraMouse AIR'de bir temizlik hatırlatma işlevi bulunur ve önerilen kullanım süresinin ardından yanıp sönen bir LED ile sizi uyarır (bkz. s. 8)

- en az iki haftada bir
- hastalık durumunda daha sık

İmha edin:

- hasar veya aşınma belirtisi görüldüğünde
- en geç altı ay sonra

Membran için İmha Aralığı

Membrani her zaman imha edin. Temizlenmesi kesinlikle önerilmez.

1.



Ağızlığı önce saat yönünde çevirin, ardından düz bir şekilde çekip çıkarın

2.



Membranı çıkarın ve imha edin

3.



Bir buharlı sterilizatörde kaynatın

4.



Ağızlığı kurulayın ve oda sıcaklığına soğumaya bırakın

5.



Yeni membranı ağızlığa takın

6.



Ağızlığı yerleştirin (pim ve yuvaya dikkat edin) ve hafif bir baskıyla saat yönünün tersine çevirin



Ağızlık
su dolu bir tencerede
de
kaynatılabilir.

- Suyu kaynatın
- Ağızlığı bir kaşık yardımıyla, tamamen suyla kaplanacak şekilde tencereye koyun
- En az 5 dakika kaynayan suda bırakın
- Ardından kaşık yardımıyla dikkatlice tencereden çıkarın

IntegraMouse AIR'in İşlevleri

IntegraMouse AIR 3 farklı çalışma modu sunar; standart mod fare modudur

	Fare	Klavye	Gamepad
Ağızlığın hareketi: - yukarı - aşağı - sola - sağa			
Emme	Sol tık	Boşluk tuşu	Düğme 1
Üfleme	Sağ tık	Enter tuşu	Düğme 2
Mikrofon	Not: Alt kısımda bir mikrofon bulunur. Bu mikrofon yalnızca kablolu modda kullanılabilir.		
Kalibrasyon: Sağ dudak düğmesine 3 saniye basın	Tüm LED'ler aynı anda yanıp söner. Lütfen ağızlığa dokunmayın		
Cihaz değiştirme: Sol dudak düğmesine kısaca basın	1x Kablo 3x Bluetooth		
Mod değiştirme: Sağ dudak düğmesine kısaca basın	 Fare	 Klavye	 Gamepad
Ağızlık Değişimi Hatırlatması	LED 0 turuncu renkte yanıp söner. Zamanlayıcıyı sıfırlamak için her iki dudak düğmesine aynı anda (3 saniye) basın.		
Düşük Akü Seviyesi Uyarısı	Kablosuz modda akü seviyesi düşük olduğunda LED 1, 2 veya 3 turuncu renkte yanıp sönmeye başlar.		
Kapatma: Sağ dudak düğmesine 6 saniye basın.	Not: IMAIR'in etkin olması gerekir (LED yanıyor olmalıdır). Tüm LED'ler sönmeye kadar basmaya devam edin.		



Diğer ayar seçenekleri ve işlevler için lütfen

www.integramouse.com adresindeki IntegraMouse web sitesinden ücretsiz ayarlar uygulamasını indirin. Orada başka yararlı bilgiler ve yapılandırmalar bulabilirsiniz.